

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-20.01-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2012

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

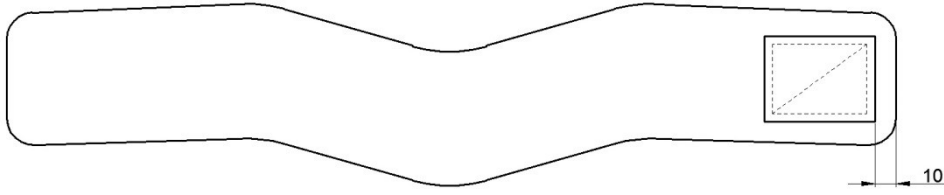
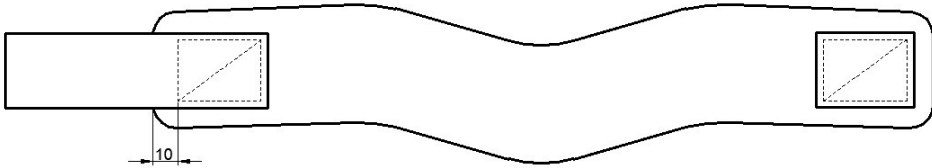
Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

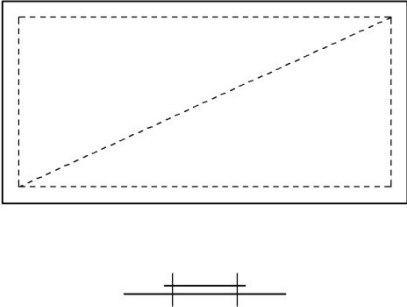
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
Rezultat 1: Kołnierz Schanza							
1	Długość całkowita kołnierza wynosi 49 cm (+/- 0,5 cm)						
2	Szerokość kołnierza w 3 najwyższych punktach wynosi 8 cm (+/- 0,5 cm)						
3	Wąż ortopedyczny jest naciągnięty bardzo dokładnie/brak jakichkolwiek zagnieceń						
4	Końcówki węża są obszyte ręcznie, zawinięte i wszyte pod taśmę Velcro						
5	Taśma samoszczepna Velcro haczyk naszyta jest po zewnętrznej stronie kołnierza. 						
6	Taśma samoszczepna Velcro pętka naszyta jest po zewnętrznej stronie kołnierza. 						

		Numer stanowiska					
7	<p>Taśmy samoszczepne Velcro wszyte są (maszynowo lub ręcznie) na odpowiedniej długości kołnierza za pomocą szwu łączącego zwykłego (jak na rysunkach w kryteriach 5 i 6)</p> 						
8	Szwy dobrze trzymające, mocne						
9	Końcówki nici opalone zapalniczką						
10	Stanowisko pracy uporządkowane tak, by nie było na blatach i podłodze resztek materiałów						
Rezultat 2: Zasady pobierania miary							
<i>Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.</i>							
Wpisane:							
1	należy zmierzyć obwód szyi						
2	wykonać pomiar w pozycji stojącej, wyprostowanej pacjenta						
3	wykonać pomiar odległości od brody do wcięcia szyjnego mostka						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Instrukcja dla pacjenta dotyczący zakładania kołnierza*Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Wpisane:

1	odpiąć rzep								
2	kołnierz ułożyć częścią wklęsłą pod żuchwą								
3	zapiąć rzep z tyłu szyi								

Rezultat 4: Instrukcja dotycząca eksploatacji i konserwacji kołnierza*Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Wpisane:

1	należy: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu								
2	należy: prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących								
3	nie wolno: dopuszczać do silnego zabrudzenia								
4	nie wolno: chlorować								
5	nie wolno: prasować								

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Koszty wykonania kołnierzy							
W tabeli kalkulacyjnej w kolumnie 2 wpisać:							
1	cena wykonania jednego kołnierza przez zakład ortopedyczny: 26,72 zł lub 26,72						
2	cena wykonania jednego kołnierza zaproponowana przedstawicielowi po doliczeniu marży: 32,06 zł lub 32,06						
3	cena za wykonanie wszystkich kołnierzy wykonanych przez zakład ortopedyczny: 400,80 zł lub 400,80						
4	cena za wykonanie wszystkich kołnierzy zaproponowana przedstawicielowi: 480,90 zł lub 480,90						
5	całkowity zysk zakładu ortopedycznego: 80,10 zł lub 80,10						
Przebieg 1. Wykonanie rozkroju kołnierza Schanza							
<i>Uwaga! Zdający zgłosi zakończenie rozkroju przez podniesienie ręki, wówczas należy ocenić kryterium 4 i 6.</i>							
Zdający:							
1	przypiął szablon do pianki poliuretanowej szpilkami, odrysował szablon markerem na piance						
2	wyciął nożyczkami lub nożem tapicerskim wzór kołnierza według załączonego szablonu						
3	oszlifował piankę na szlifierce/wydrążarce tak, by powierzchnie kołnierza były gładkie bez nierówności						
4	zeszlifował końcówki zapięć kołnierza do grubości 1,5 cm (+/-0,5 cm) <i>Uwaga! Należy ocenić przed zszyciem kołnierza.</i>						
5	pozostałości pianki poliuretanowej usunął za pomocą suszarki lub sprężarki						
6	wyciął wąż ortopedyczny na długość 57 cm (+/-1 cm) <i>Uwaga! Należy ocenić przed zszyciem kołnierza.</i>						
7	wyciął taśmę samoszczepną Velcro pętka o szerokości 5 cm i długości 15 cm (+/-1 cm)						
8	wyciął taśmę samoszczepną Velcro haczyk o szerokości 5 cm i długości 6 cm (+/- 1 cm)						
9	szlifował piankę w okularach ochronnych i rękawiczkach ochronnych						
10	wyłączył szlifierkę/wydrążarkę i maszynę z zasilania po zakończonej pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis